

Zeckenentferner

rostfreier Edelstahl



**Die blutsaugende
Zecke überträgt
FSME und Borreliose.**

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Borreliose können zur Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns, der Nerven und des Rückenmarks führen.

Die Erreger der Borreliose werden in der Regel erst einen Tag nach dem Zeckenbiss übertragen. Daher ist es wichtig den Parasiten so rasch wie möglich zu entfernen. Dabei ist es unbedingt zu beachten den Hinterleib nicht zu quetschen.

Mit dem Zeckenentferner können Sie die Zecke sicher und einfach entfernen.

Dieses Produkt ist patentrechtlich geschützt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch der Zange auf eigene Verantwortung geschieht. Die Haftung für Schäden jeglicher Art schliessen wir ausdrücklich aus.



1.
Öffnen Sie die Zange indem Sie mit dem Zeigefinger auf den Öffnungshebel drücken.



2.
Führen Sie das kurze Ende **unter** den Bauch der Zecke, so nah wie möglich an die Haut des Wirts



3.
Schließen Sie die Zange indem Sie den Zeigefinger vom Öffnungshebel nehmen.



4.
Entfernen sie nun den Parasiten indem Sie ihn herausziehen. Wir empfehlen beim Ziehen eine Drehbewegung zu machen.



5.
Bewahren Sie die Zecke auf und bringen Sie sie Ihrem Hausarzt. Er kann sie auf Borreliose Bakterien und den FSME Erreger testen und ggf. die nötigen Maßnahmen ergreifen.

erbrich - instrumente GmbH


Eugenstr. 33 • D-78532 Tuttlingen

Tel.: +49 74 61 / 96 57 30

Fax: +49 74 61 / 96 57 320

E-mail: erbrich-instruments@t-online.de

Website: www.erbrich-instruments.com

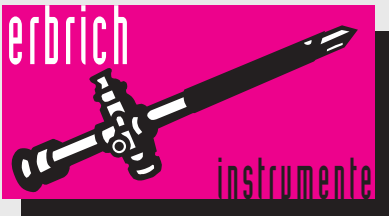

Tick remover

stainless steel



The bloodsucking tick transmits TBE and borreliosis

TBE (tick-borne encephalitis) and borreliosis can cause inflammations of the meninges, the brain, the nerves and of the medulla.

Generally the borreliosis virus will be transmitted one day after the tick bite. Because of that it is very important to remove the parasite immediately. In the process it is essential to consider not to crush the abdomen.

With the tick remover you're able to remove the tick safe and simple. .

This product is protected by letters patent. We point out explicit that the use of the tick remover happens at owner's risk. We exclude the liability for harms of any sort.



1.
Open the forceps by pushing the opening lever with the forefinger..



2.
Lead the short end below the abdomen of the tick, as close as possible to the skin of the host.



3.
Close the forceps by removing the forefinger from the opening lever.



4.
Now remove the parasite by extracting it. We recommend to make a rotary motion during the extraction.



5.
Keep the tick safe and bring it to your general practitioner. He is able to test the tick for borreliosis and TBE and he is also able to take the required actions if necessary.

erbrich - instrumente GmbH

Eugenstr. 33 • D-78532 Tuttlingen

Tel.: +49 74 61 / 96 57 30

Fax: +49 74 61 / 96 57 320

E-mail: erbrich-instruments@t-online.de

Website: www.erbrich-instruments.com